

ООО «ТРОНИТЕК»

Аппарат косметологический

ДиаДЭНС•Космо

Руководство по эксплуатации

ТРТК 14.0-03.70-08 РЭ
ТУ 3468-014-44148620-2009





СОДЕРЖАНИЕ

| | | | |
|---|----|--|----|
| 1. Правила безопасности | 4 | 8. Возможные неисправности и способы их устранения..... | 23 |
| 2. Общие сведения..... | 7 | 9. Техническая информация..... | 24 |
| 3. Назначение изделия..... | 8 | 10. Гарантии изготовителя..... | 27 |
| 4. Описание изделия..... | 9 | 11. Адрес предприятия-изготовителя | 28 |
| 5. Инструкция по применению | 14 | 12. Контакты | 28 |
| 6. Комплектность..... | 21 | 13. Талон на гарантийный ремонт | 29 |
| 7. Техническое обслуживание и порядок замены источников питания..... | 22 | 14. Свидетельство о приемке | 32 |

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ АППАРАТА ДиаДЭНС-Космо!

Для того чтобы применение аппарата было эффективным и безопасным, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми разделами данного руководства.



1 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Обратите внимание на информацию, отмеченную этим знаком. Данная информация важна для обеспечения безопасного и эффективного использования аппарата.



Информация, содержащаяся в данном руководстве по эксплуатации, важна для вашей безопасности и для правильного использования и ухода за аппаратом.



Работающее вблизи коротковолновое или микроволновое оборудование может вызвать нестабильность выходных параметров аппарата.



Избегайте длительного нахождения аппарата под воздействием прямых солнечных лучей при высокой (>25 °C) температуре воздуха. Это может вывести из строя индикатор аппарата либо разрушить элементы питания.




Изделие содержит хрупкие элементы. Предохраняйте его от ударов.



Аппарат не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.




Все работы по ремонту изделия должны проводить квалифицированные специалисты на предприятии-изготовителе.

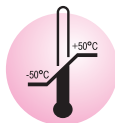


Условия транспортирования:

- температура от -50 до +50 °C;
- относительная влажность воздуха от 30 до 93 %;
- атмосферное давление от 70 до 106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.).

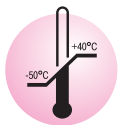

Условия хранения:

- температура от -50 до +40 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 93 %;
- атмосферное давление от 70 до 106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.).

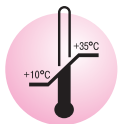

Условия эксплуатации:

- температура от +10 до +35 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 93 %;
- атмосферное давление от 70 до 106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.).



Если аппарат хранился при температуре окружающего воздуха ниже 10 °С, выдержите его при комнатной температуре не менее двух часов перед использованием.



Утилизация: материалы упаковки аппарата не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, их можно использовать повторно.



Отдельный сбор электрического и электронного оборудования.



Аппарат содержит ценные материалы, которые могут быть вторично использованы после утилизации с учетом требований охраны окружающей среды. Их следует сдать в специально предназначенные места (проконсультируйтесь в соответствующих службах вашего района) для сбора и переработки.



Противопоказания

Использование в косметологии электрического тока малой силы является безопасным для людей, не имеющих проблем со здоровьем. Но есть ряд заболеваний и патологических состояний, при которых использование аппарата может быть ограничено или запрещено по медицинским показаниям.

К ним относятся:

- наличие имплантированного кардиостимулятора или других имплантированных электронных устройств;
- индивидуальная непереносимость тока;
- эпилепсия с частыми судорожными приступами;
- лихорадочные состояния неясного происхождения;
- новообразования;
- общее тяжелое состояние пациента;
- инфекционные заболевания кожи.

При наличии вышеперечисленных проблем со здоровьем применение аппарата необходимо согласовать с врачом.



Отсутствуют контролируемые исследования применения аппарата у беременных женщин.



2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кожа лица может терять свою привлекательность из-за появления морщин, пигментных пятен, шелушения, потери эластичности, обезвоживания. Чаще всего причиной этого являются возрастные изменения, касающиеся всего организма в целом. Однако подобные изменения могут наблюдаться в любом возрасте, если кожа лица подвергается воздействию агрессивных факторов внешней среды. В результате нарушается нормальное кровообращение и, как следствие, питание кожи. Она становится сухой, ухудшается ее эластичность, изменяется цвет, появляются морщины. И если остановить бег времени невозможно, то защитить кожу и уменьшить последствия контакта с окружающей средой вполне по силам современной косметологии.

В основе косметологических эффектов аппарата лежит воздействие на кожу импульсами электрического тока малой силы (микротоков). Под действием микротоков восстанавливается тонус мышц и сосудов, улучшается микроциркуляция и питание кожи. В результате активизируются обменные процессы и происходит омолаживание кожи. Ее вид становится свежим и привлекательным.



3 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Аппарат ДиаДЭНС-Космо предназначен для проведения косметических процедур на лице.

Проведение процедур не требует специальных условий.

Аппарат может применяться в домашних условиях.

4 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



Рис. 1. Внешний вид аппарата.
Лицевая сторона

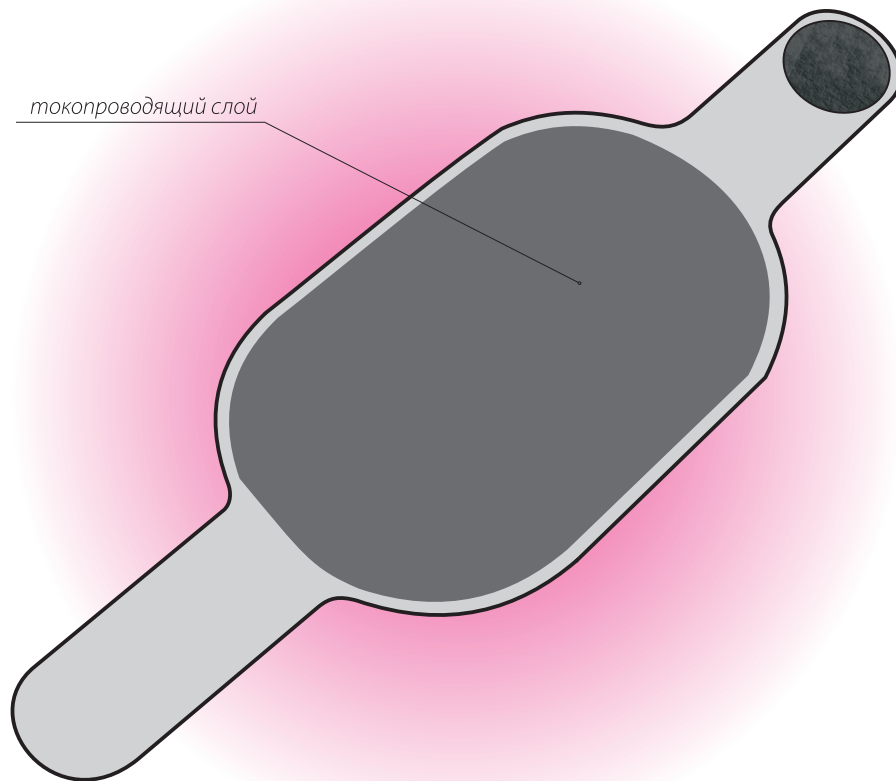


Рис. 2. Внешний вид аппарата.

Тыльная сторона с токопроводящей манжетой

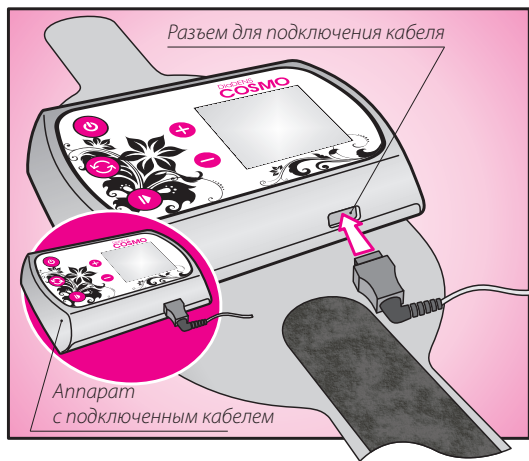


Рис. 3. Внешний вид аппарата.
Разъем для подключения кабеля
и аппарат с подключенным кабелем

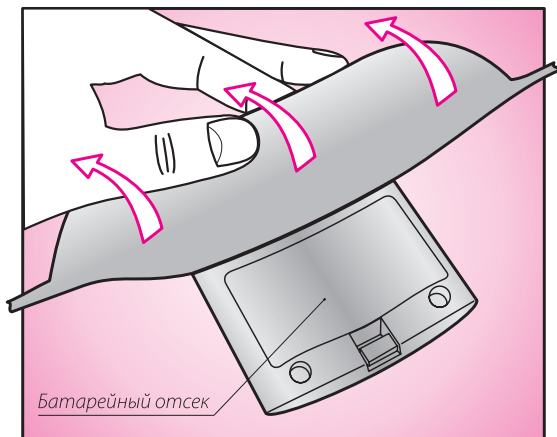


Рис. 4. Внешний вид аппарата.
Батарейный отсек



Рис. 5. Внешний вид электрода-маски



Запрещается подключать электрод-маску к любым другим устройствам, кроме аппарата ДиаДЭНС-Космо.

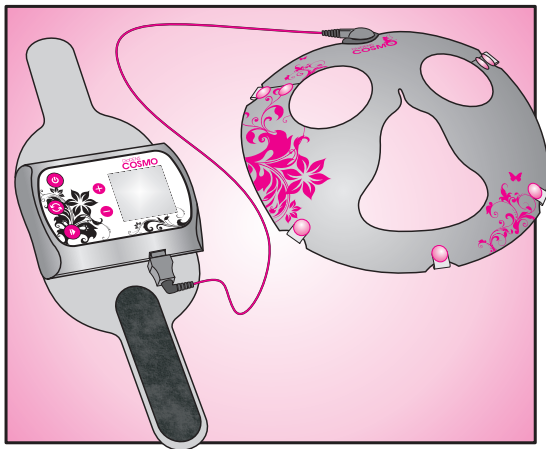


Рис. 6. Косметологический аппарат с подключенным электродом-маской



Запрещается подключать к аппарату выносные электроды, кроме электрода-маски, предназначенного для совместной работы с аппаратом ДиаДЭНС-Космо.

Рис. 7. Расположение и назначение кнопок клавиатуры


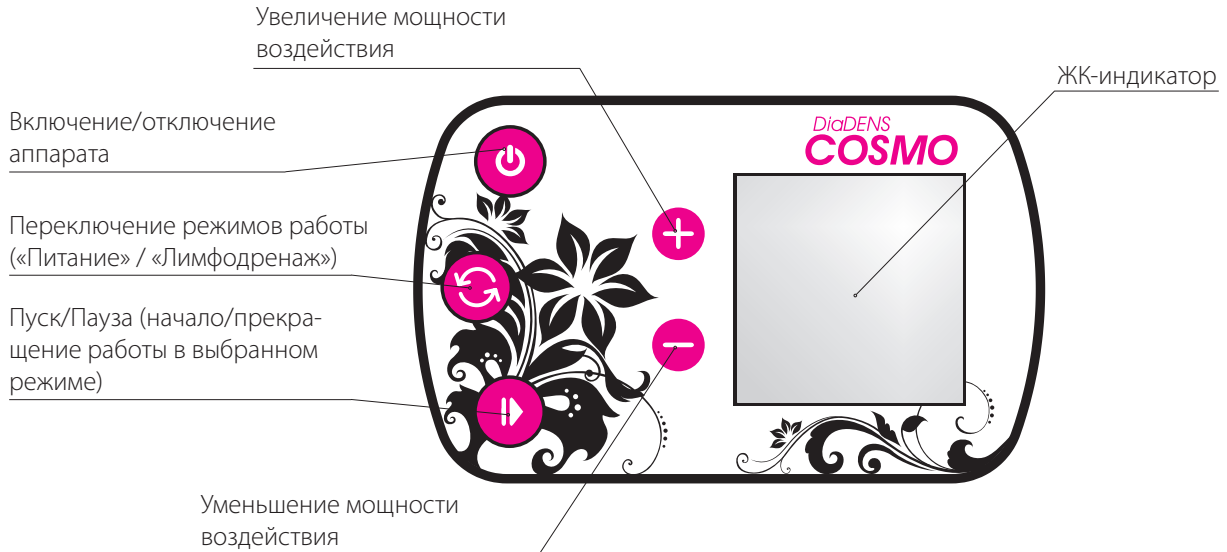


Рис. 8. Назначение символов на индикаторе аппарата



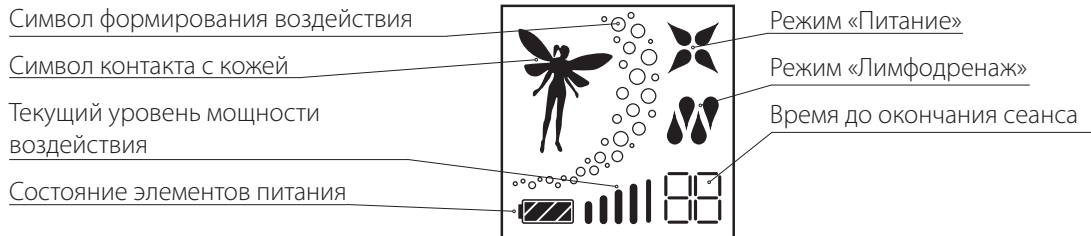

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

5.1. Условия для проведения процедур

Проведение процедуры не требует специальных условий. Помещение должно быть сухим и теплым. Во время сеанса пациент может сидеть или лежать в удобном для него положении. После процедуры рекомендуется спокойный отдых в течение 10–15 минут.

Продукция, рекомендованная для применения совместно с аппаратом ДиаДЭНС-Космо:

- косметические маски для лица серии «ДиаДЭНС-Космо»;
- салфетка-маска для использования с физиологическим раствором (0,9 % раствор NaCl) или 1 % раствором Карловарской соли.

5.2. Тестирование косметической маски на аллергенность

Все косметические маски для лица серии «ДиаДЭНС-Космо» являются гипоаллергенными, однако если у вас есть склонность к аллергическим реакциям, сделайте пробу:

- 1) нанесите каплю косметического раствора на кожу в области локтевого сгиба и дайте высохнуть;
- 2) если в течение 1–2 часов кожа покраснеет, то проводить процедуру с данной косметической маской не следует.

5.3. Подготовка кожи лица к процедуре



Перед сеансом обязательно снимите с головы все металлические украшения. Использование аппарата при наличии токопроводящих украшений запрещено, так как это может существенно снизить эффективность сеанса.

Не используйте аппарат при наличии поврежденной кожи и признаках воспаления в области лица.

Очень важно для вашей безопасности, чтобы процедура проводилась на очищенной от любых косметических средств коже лица. Для этого:

- 1) удалите тоником все косметические средства с лица;
- 2) тщательно умойте лицо большим количеством проточной воды;
- 3) удалите остатки влаги полотенцем или сухой салфеткой.

5.4. Общие рекомендации по проведению процедур и выбору программ аппарата

При применении аппарата необходимо учитывать, что наиболее выраженный эффект наступает в результате курсового лечения продолжительностью от 5–6 до 10–12 процедур. Эффект возникает постепенно, так как клеткам кожи необходимо время для восстановления. Суммарный эффект процедур обеспечивает также длительное последствие курса процедур, которое необходимо поддерживать 1–2 процедурами в неделю.

Продолжительное непрерывное использование одного физического фактора увеличивает

адаптацию к нему и может снижать эффективность процедур. Поэтому аппарат не рекомендуется применять постоянно. Кроме того, вероятностный характер физиологических процессов в организме обуславливает у незначительного количества людей (не более 2–3 %) недостаточную эффективность или полное отсутствие реакций от применения (без каких-либо негативных последствий).

В зависимости от типа вашей кожи, а также ее исходного уровня, возраста и преследуемых задач схемы применения аппарата могут быть различными. Вы можете создать их сами или воспользоваться предложенными. Основных подходов два:

- 1) курс из 6–12 процедур 1 раз в квартал, а между курсами — поддерживающая терапия из 1–2 процедур в неделю;
- 2) курсы из 5–6 процедур 1 раз в месяц, без поддерживающей терапии.

5.5. Программа «Питание»

Данная программа рекомендуется как базисная для косметического курса, обеспечивающая

улучшение кровотока в коже лица и усиливающая усвоение активных компонентов косметических масок серии «ДиаДЭНС-Космо».

5.6. Программа «Лимфодренаж»

Программа «Лимфодренаж» предназначена для подтяжки контура лица и достижения противотекающего эффекта. Ее рекомендуется чередовать с программой «Питание» в тех случаях, если наблюдается склонность к отечности лица.

Реализуется данная программа с помощью салфетки-маски, смоченной в солевом растворе, например в физиологическом растворе (0,9 % раствор NaCl) или 1 % растворе Карловарской соли.

5.7. Сочетание программ при проведении сеанса

Рекомендуется во время сеанса использовать какую-либо одну программу аппарата. Вопрос о целесообразности последовательного применения двух программ в течение одного сеанса необходимо решать индивидуально, в зависимости от эффективности процедур и индивидуальной чувствительности к ним.



Соблюдайте рекомендуемые схемы применения. Слишком частое использование аппарата может вызвать раздражение кожи.

5.8. Подготовка аппарата к проведению процедуры

Перед использованием убедитесь, что на корпусе аппарата отсутствуют какие-либо следы падений, ударов, ЖК-индикатор аппарата не разбит. Убедитесь, что на электроде-манжете и на электроде-маске отсутствуют следы посторонних веществ, а также отсутствуют следы повреждения. *Запрещается использовать аппарат при наличии повреждений.*



Запрещается использовать электрод-маску при наличии повреждений токопроводящего слоя (изменение цвета, механическое разрушение).

Если аппарат находился в холоде или в условиях повышенной влажности, перед использованием необходимо выдерживать его не менее 2 часов в помещении при комнатной температуре.

5.8.1. При отсутствии элементов питания в батарейном отсеке установите источники питания; при установке соблюдайте полярность.

5.8.2. Перед первым использованием промойте электрод-манжету и электрод-маску мыльным раствором. Смойте остатки мыла проточной водой. Сухой салфеткой удалите остатки влаги.

5.8.3. Положите электрод-маску перед собой декоративной стороной вниз.

5.8.4. Подсоедините провод к электроду-маске.

5.8.5. Слегка увлажните кожу на тыльной поверхности предплечья. Закрепите аппарат на руке так, чтобы электрод-манжета плотно прижимался к увлажненной коже.



В случае неплотного контакта электрода-манжеты с кожей возможно появление неприятных ощущений во время проведения сеанса.

Не рекомендуется использовать один электрод-маску нескольким пользователям.

5.9. Проведение сеанса

5.9.1. Программа «Питание»

Достаньте из упаковки одну из масок серии «ДиаДЭНС-Космо», тщательно расправьте и наложите на лицо.



Перед использованием убедитесь в целостности упаковки отдельных косметических масок. Не используйте косметические маски с нарушенной упаковкой.

Запрещается использовать косметические маски, длительно находящиеся на открытом воздухе или имеющие признаки высыхания. Рекомендуется использовать маски в течение 20–30 минут после извлечения из упаковки.

Не следует дополнительно увлажнять косметическую маску каким-либо раствором, не рекомендованным для совместного применения с аппаратом ДиаДЭНС-Космо.

Внимание! *Допускается использовать совместно с аппаратом только*

рекомендованные косметические маски. Тестирование любых других косметических масок на совместное использование с аппаратом не проводилось.

Запрещается использование косметических масок с истекшим сроком годности.

5.9.2. Программа «Лимфодренаж»

Приготовьте солевой раствор (например, 1 % раствор Карловарской соли: 1 чайная ложка на 0,5 литра воды) или воспользуйтесь готовым физиологическим раствором (0,9 % раствор NaCl). Достаньте салфетку-маску из упаковки. Пропитайте ее солевым раствором и отожмите излишки. Тщательно расправьте маску и наложите на лицо.

5.9.3. Скользящими движениями расправьте маску, чтобы она плотно прилегалась к коже лица.



Внимание! Не размещайте электрод-маску на коже без косметической маски. Использование аппарата без косметической маски может вызвать ожог электрическим током, аллергическую реакцию, а также болезненные ощущения.


5.9.4. Наложите на лицо и закрепите электрод-маску поверх косметической маски. Следите за тем, чтобы электрод-маска не касалась непосредственно кожи лица!





Внимание! Не следует добиваться абсолютного прилегания электрода-маски к лицу. Достаточно нескольких точек контакта по периметру лица. Питательная маска является проводником импульсов на 6–8 см от места каждого контакта с электродом-маской.

5.9.5. Подсоедините провод, идущий от электрода-маски, к аппарату.

5.9.6. Включите аппарат кнопкой .


5.9.7. Выберите при помощи кнопки  программу: «Питание» или «Лимфодренаж».

5.9.8. Для начала процедуры нажмите кнопку .

5.9.9. Нажатием кнопки  постепенно увеличьте мощность до ощущения легкого покалывания или вибрации под электродом-маской или под электродом на руке.



Чувствительность к электрическому воздействию у разных людей может значительно различаться, и часть людей при достижении максимальной мощности могут не испытывать никаких ощущений. Это не является неисправностью аппарата и не влияет на эффективность процедур.

В случае если при увеличении мощности у вас появились неприятные ощущения, уменьшите мощность воздействия с помощью кнопки  до комфортного уровня. Не проводите процедуру при неприятной или непереносимой мощности!

5.9.10. По окончании работы прозвучит сигнал и воздействие прекратится.

5.9.11. Снимите с лица электрод-маску, затем удалите косметическую маску.



Косметическая маска является однократной. Повторное применение маски не допускается.

5.9.12. Снимите с руки аппарат. Отсоедините провод от электрода-маски и от аппарата. При извлечении штекера из аппарата будьте аккуратны: держитесь за штекер, не раскачивайте его и не наклоняйте.

5.9.13. Удалите остатки косметической маски с лица теплой проточной водой.

5.10. Обязательный уход за электродом-маской

Сразу же после сеанса тщательно удалите остатки косметического раствора с электрода-маски проточной водой с мылом.

Тщательное очищение после сеанса обеспечивает безопасность дальнейших процедур и значительно повышает ресурс электрода-маски.

Предприятие-изготовитель рекомендует менять электрод-маску после 60 процедур.



Внимание! Электрод-маску хранить сухим!



Не допускайте засыхания косметического раствора на электроде-маске. Проводите очистку сразу по окончании процедуры.

Запрещается дальнейшая эксплуатация электрода-маски, если он не был обработан и на нем имеются следы окисления зеленого цвета!

После использования следует обязательно очистить электрод-маску, а также токопроводящий слой манжеты. Отсутствие адекватной очистки может привести к возникновению ал-

лергических реакций либо перекрестного инфицирования при использовании аппарата несколькими людьми.



В случае индивидуальной непереносимости, когда во время проведения сеанса наблюдается ухудшение самочувствия, или если после проведения сеанса возникает раздражение кожи, необходимо прекратить воздействие и проконсультироваться с врачом.



6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аппарат поставляется в следующей комплектности:

| Наименование | Кол-во (шт.) |
|--|--------------|
| Аппарат ДиаДЭНС-Космо с электродом-манжетой | 1 |
| Электрод-маска* | 1 |
| Кабель* | 1 |
| Косметическая маска ДиаДЭНС-Космо увлажняющая и очищающая* | 6 |
| Удлинитель манжеты | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Элемент питания | 2 |
| Потребительская тара | 1 |

Допускается дополнительное вложение пробных образцов других протестированных изготовителем аппарата косметических масок.

**Дополнительные принадлежности и расходные материалы (электроды-маски, кабели, косметические маски, салфетки-маски) продаются отдельно.*




7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

7.1. Техническое обслуживание аппарата включает следующие операции:


- 1) Внешний осмотр изделия. Необходимо убедиться, что на аппарате отсутствуют следы ударов, падений, т.к. это может привести к некорректной работе аппарата.
- 2) Перед использованием и после использования аппарата необходимо очистить токопроводящую область манжеты, а также токопроводящую поверхность электрода-маски. Отсутствие адекватной очистки может привести к возникновению аллергических реакций либо к инфицированию кожи, особенно при применении аппарата несколькими пользователями. Очистку проводите с мылом под проточной водой.

7.2. Если предполагается не использовать аппарат в течение длительного времени (более 3 дней), извлеките источники питания из батарейного отсека. Это предотвратит их преждевременную разрядку.

7.3. При мигании символа состояния батареи на ЖК-индикаторе следует заменить источники питания аппарата. Для этого:

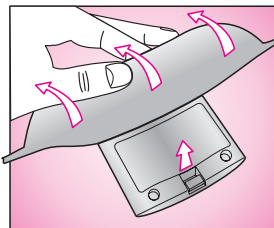

1) аккуратно отогните манжету со стороны батарейного отсека и снимите его крышку;

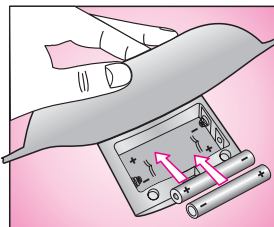

2) извлеките старые элементы питания и установите новые, соблюдая полярность*.

* Устанавливайте только источники питания, предусмотренные для данного изделия – типа LR6/AA с номинальным напряжением 1,5 В.



8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице приведены ситуации, которые могут быть интерпретированы как неисправность и устранены самостоятельно. В случае других не-

исправностей свяжитесь с представителем изготовителя (см. раздел 11), не пытайтесь устранить их самостоятельно.

Таблица 1

Возможные неисправности аппарата и способы их устранения

| Проявление | Способ устранения |
|---|---|
| При включении аппарат подает звуковой сигнал и автоматически выключается | Установите новые элементы питания с соблюдением полярности (см. п. 7.3). Если после установки новых элементов питания аппарат не включается или после включения звучит сигнал и аппарат выключается, обратитесь к представителю компании (см. раздел 11) |
| Аппарат не начинает процедуру (не появляется сигнал наличия контакта с кожей) | <ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь в плотности контакта электрода-манжеты с кожей предплечья, увлажните кожу под электродом-манжетой.2. Проверьте надежность подключения соединительного кабеля к разъему в корпусе аппарата.3. Убедитесь, что ответная часть кабеля надежно подключена к электроду-маске.4. Если вы используете салфетку-маску, убедитесь в том, что она достаточно увлажнена солевым раствором. Если символ контакта на включенном аппарате не появился — обратитесь к представителю компании (см. раздел 11). |

9 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Максимальный потребляемый ток (при напряжении питания $3,0 \pm 0,1$ В):

- в режиме формирования воздействия не более 300 мА;
- в выключенном состоянии не более 10 мкА.

9.2. Масса аппарата без элементов питания — не более 300 г.

9.3. Габаритные размеры аппарата с манжетой не более 300×100×35 мм.

9.4. Аппарат автоматически отключается,



если после включения его не используют более 1,5 мин.







9.5. Частота следования импульсов воздействия в режиме «Питание» 100 ± 30 Гц;


9.6. Частота следования импульсов воздействия в режиме «Лимфодренаж» 100 ± 30 Гц и 50 ± 15 Гц;

9.7. Продолжительность воздействия 15 ± 1 мин.

9.8. Зависимость формы импульса от сопротивления нагрузки при минимальном и максимальном уровне мощности. Режим «Лимфодренаж»:
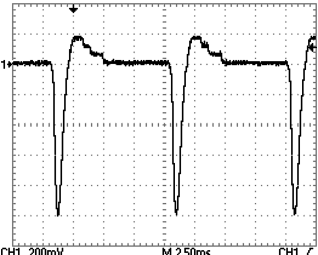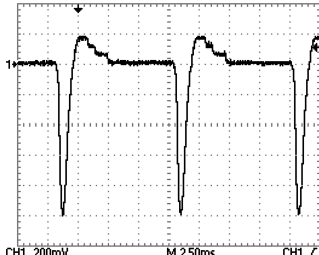
| Сопротивление нагрузки | Уровень мощности: Min | | Уровень мощности: Max | |
|------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | Форма сигнала | V_{p-p} | Форма сигнала | V_{p-p} |
| Без нагрузки |  | $\approx 1,2$ В $\pm 20\%$ |  | $\approx 1,2$ В $\pm 20\%$ |
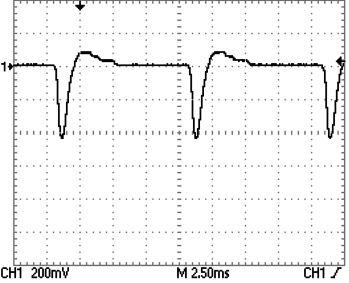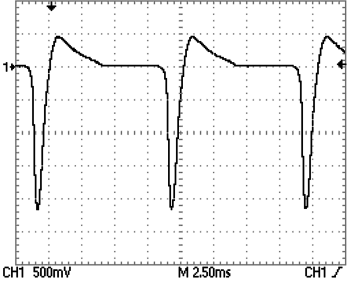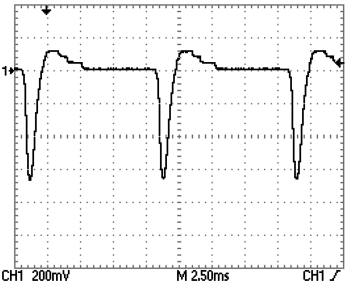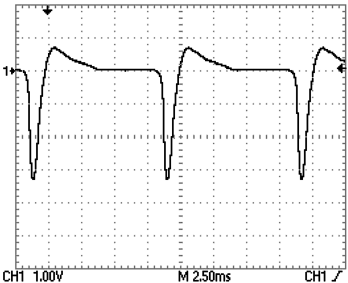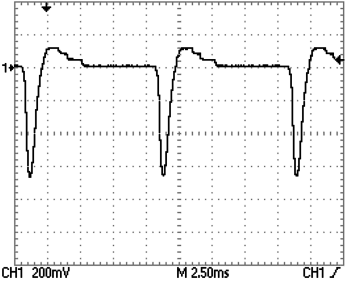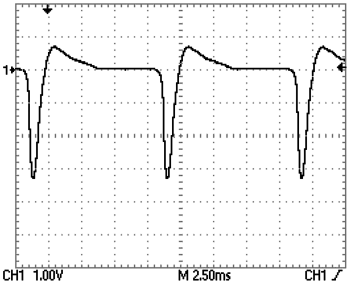
| | | | | |
|---------------|---|---|--|--|
| <p>200 Ом</p> |  <p>CH1 200mV M 2.50ms CH1 /</p> | <p>$\approx 0,5 \text{ B} \pm 20 \%$</p> |  <p>CH1 500mV M 2.50ms CH1 /</p> | <p>$\approx 2,5 \text{ B} \pm 20 \%$</p> |
| <p>500 Ом</p> |  <p>CH1 200mV M 2.50ms CH1 /</p> | <p>$\approx 0,77 \text{ B} \pm 20 \%$ $E_{\text{pulse}} \approx 0,92 \text{ мкДж}$</p> |  <p>CH1 1.00V M 2.50ms CH1 /</p> | <p>$\approx 4 \text{ B} \pm 20 \%$ $E_{\text{pulse}} \approx 25 \text{ мкДж}$</p> |
| <p>1 кОм</p> |  <p>CH1 200mV M 2.50ms CH1 /</p> | <p>$\approx 0,9 \text{ B} \pm 20 \%$</p> |  <p>CH1 1.00V M 2.50ms CH1 /</p> | <p>$\approx 4,7 \text{ B} \pm 20 \%$</p> |

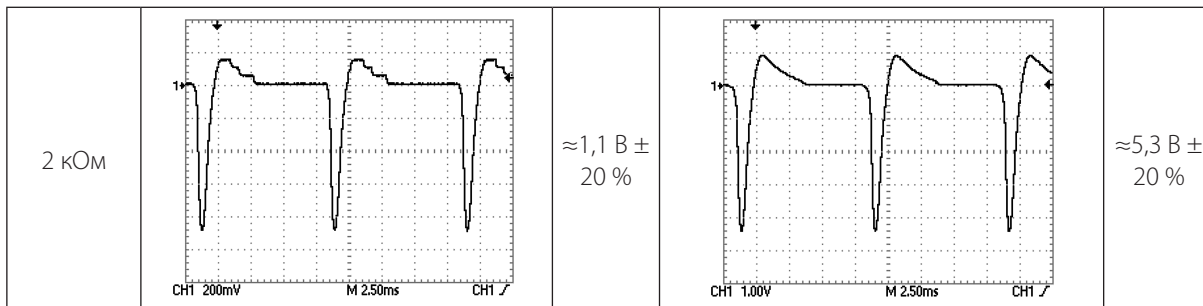

9.9. Эффективное значение тока: I_{eff} на нагрузке 500 Ом:

| Режим | Уровень мощности: Min | Уровень мощности: Max |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Лимфодренаж | $I_{\text{eff}}=0,43 \text{ mA}$ | $I_{\text{eff}}=2,22 \text{ mA}$ |



10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие электростимулятора спецификации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

10.2. Срок службы изделия — 5 лет.

При соблюдении правил эксплуатации срок службы может значительно превысить официально установленный.

10.3. Гарантийный срок эксплуатации аппарата — 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок эксплуатации принадлежностей (электрод-маска и кабель) — 1 месяц со дня продажи.

10.4. В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока продавец (изготовитель) обязуется удовлетворить требования потребителя, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей».

Продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация не отвечает

за недостатки, если они возникли после передачи изделия потребителю вследствие:

- 1) нарушения потребителем правил транспортировки, хранения, ухода и эксплуатации, предусмотренных настоящим руководством;
- 2) механических повреждений;
- 3) действий третьих лиц;
- 4) форс-мажорных обстоятельств.

10.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с нарушенными заводскими пломбами.

10.6. В случае отказа изделия или его неисправности в период действия гарантийных обязательств, а также при обнаружении некомплектности владелец изделия должен направить в адрес предприятия-изготовителя или его представителя аппарат и заявку на ремонт (замену) с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, номера телефона, кратким описанием неисправности, условиями и датой ее проявления.



11 АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «ТРОНИТЕК»

620146, Россия

г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 15

Телефон: +7 (343) 267-23-30

<http://www.denascorp.ru>

e-mail: corp@denascorp.ru



12 КОНТАКТЫ

По всем возникающим вопросам, касающимся работы аппарата, приобретения расходных материалов и т. п., вы можете обращаться:

Дистрибьютор:

Ф.И.О.

телефон

Сайт:

www.denascorp.ru

Телефон:

8-800-200-1919 (звонок по России бесплатный)



ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Наименование: ДиаДЭНС-Космо

Серийный номер изделия _____

Дата изготовления _____

Дата покупки _____

Владелец _____

Адрес: _____

Телефон _____ домашний _____ рабочий _____

Дата отправки в ремонт _____

Причина отправки в ремонт _____

Отметка о ремонте _____

Подпись должностного лица предприятия,
ответственного за приемку после ремонта _____

Изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Дата получения _____

Гарантия на отремонтированное изделие составляет 6 месяцев с момента получения изделия из ремонта. Если гарантийный срок с момента приобретения изделия составляет более 6 месяцев, то гарантия исчисляется по большему сроку. Также гарантийный срок увеличивается на время нахождения изделия в ремонте.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат косметологический ДиаДЭНС-Космо соответствует спецификации и признан годным для эксплуатации.

Серийный номер:

Дата изготовления:

Отметка о приемке:

Подпись продавца: _____

Дата продажи: _____

С условиями гарантии ознакомлен, изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Дата: _____

Внимательно осматривайте аппарат при покупке!

Дефекты корпуса или дисплея (царапины, трещины, сколы) не являются гарантийными случаями. Аппараты с такими дефектами обмену, ремонту или возврату по гарантии не подлежат.